




ACCESOS
VASCULARES

BITA PICC

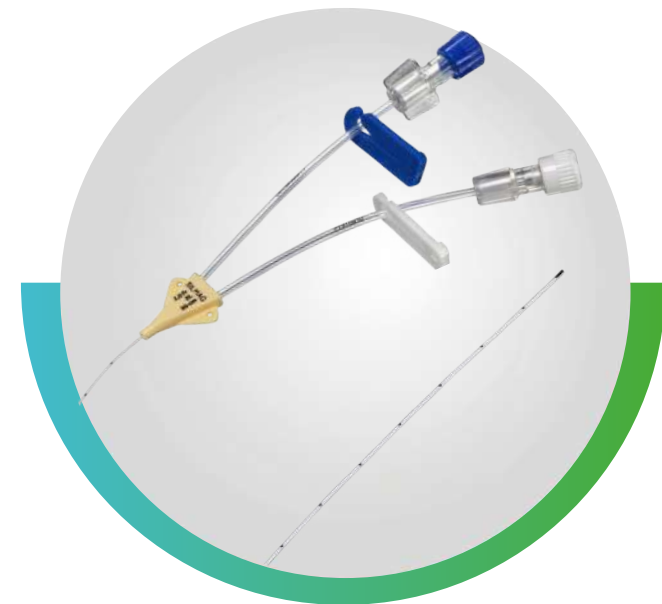

Catéter para Canalización
Endovenosa



SALVANDO VIDAS

www.gruposilmag.com



BSI British Standards Institution
Quality Management System
Nº FM 664794
ISO 13485



Catéter para canalización endovenosa diseñado 100% en poliuretano. Apto para pacientes neonatales, lactantes y pediátricos que:

- ✓ Requieran nutrición parenteral.
- ✓ Administración de soluciones hiperosmolares e intravenosas.
- ✓ Infusión de drogas vasoactivas.



Doble lumen



Simple lumen



PRINCIPALES VENTAJAS

- ✓ Dimensiones y lúmenes adecuados para recién nacidos de muy bajo peso y prematuros extremos.
- ✓ Administración de soluciones incompatibles a través del doble lumen.
- ✓ Marcación centimetrada y punta pintada que permiten verificar la correcta colocación y extracción del catéter.
- ✓ Introducitor pelable con ojo lateral para visualizar retorno sanguíneo.
- ✓ La cinta métrica asegura mayor precisión en la posición del catéter.

COMPONENTES



Blíster bandeja

- Rápida apertura.
- Manipulación segura.
- Apto para uso sobre campo estéril.



Conectores neutros (libres de aguja).



Pinza de acero inoxidable.



Cinta métrica descartable.



Introducitor pelable.



Lazo hemostático de silicona.

SIMPLE LUMEN				
Calibre	Ø Exterior x Ø Interior (mm)	Longitud (cm)	Flujo (ml/min)**	Códigos
1 Fr*	0,40 x 0,20	15	2	581-01-15-S
		20	1,5	581-01-20-S
2 Fr	0,62 x 0,30	15	10	581-02-15-S
		30	6,5	581-02-30-S
3 Fr	1,00 x 0,50	30	16,5	581-03-30-S
		60	9,5	581-03-60-S
4 Fr	1,35 x 0,80	30	62	581-04-30-S
		60	50	581-04-60-S
5 Fr	1,65 x 1,05	60	90	581-05-60-S
DOBLE LUMEN				
2 Fr	0,64 x (0,20 x 2)	20	2x4,0	581-02-20-D
		30	2x3,0	581-02-30-D
3 Fr	0,95 x (0,30 x 2)	50	2 x 11,0	581-03-50-D
4 Fr	1,40 x (0,40 x 2)	60	2 x 20,0	581-04-60-D

*La medida de 1,0 FR no incluye introducitor pelable.

**Medición realizada a 1 bar de presión.